

Antwoorden op veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik het buisje gebruiken?

De uiterste houdbaarheidsdatum staat op het buisje aangegeven (jaar, maand).

Ik moet het buisje op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag vóór 17.00 uur versturen. Waarom is dit?

Op deze dagen is de tijd tussen het versturen van het buisje en de aankomst in het laboratorium zo kort mogelijk. Hoe sneller het onderzoek in het laboratorium uitgevoerd kan worden, hoe beter. Als u op vrijdagavond, zaterdag of zondag het buisje opstuurt, komt dit pas op dinsdag aan in het laboratorium.

Ik ben het buisje kwijt/ het buisje is beschadigd. Wat moet ik nu doen?

Als u het buisje kwijtraakt of als er bijvoorbeeld per ongeluk vloeistof uit het buisje is gelopen, dan kunt u een nieuw buisje aanvragen. U kunt hiervoor bellen met de informatielijn van de screeningsorganisatie.

Er is iets fout gegaan. Wat kan ik nu doen?

Is er iets niet goed gegaan met het buisje of het verzamelen van ontlasting? Bel dan de informatielijn van de screeningsorganisatie.

Waarom moet ik het buisje met ontlasting in de koelkast bewaren totdat ik het op de post doe?

Als er bloed in uw ontlasting zit, blijft dat beter aantoonbaar met het onderzoek in het laboratorium als het gekoeld wordt bewaard.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Kijk op de website hoe u op de juiste manier ontlasting in het buisje doet. Ook vindt u er antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt bellen met de informatielijn van de screeningsorganisatie. Het telefoonnummer en de website van de screeningsorganisatie in uw regio vindt u in de brief of via www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.



Andere talen/other languages

U kunt deze informatie lezen in het Arabisch / Engels / Turks op:

This information is available in English at:

Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

يمكنكم قراءة هذه المعلومات باللغة العربية على الموقع:

www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl

bevolkingsonderzoek

Gebruiksaanwijzing

Bij de uitnodiging zit een buisje, de zelfafnametest. U prikt op vier verschillende plaatsen in uw ontlasting. Dit doet u met het staafje dat aan de groene dop zit van de zelfafnametest. Het is voldoende als er een klein beetje ontlasting aan het staafje blijft zitten. Er is weinig ontlasting nodig om het onderzoek goed te doen. In deze gebruiksaanwijzing staat stap voor stap beschreven hoe u dit doet.

Het buisje

Aan het buisje zit een groen dopje en een doorzichtig dopje. **U mag alleen aan het groene dopje draaien!**


Als het buisje aan het doorzichtige gedeelte wordt opengemaakt, loopt de vloeistof eruit. Het buisje is dan niet meer bruikbaar. De heldere vloeistof is een onschuldige zoutoplossing. Dit is nodig om uw ontlasting goed te kunnen onderzoeken.




Hoe voert u de test uit?




- 1 Belangrijk: uw ontlasting mag *niet* in aanraking komen met urine of met het water in het toilet. Leg daarom voldoende velletjes toiletpapier in het toilet.

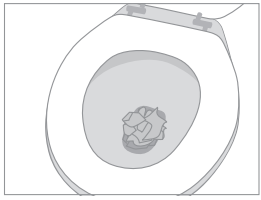


2 U kunt ook een prop toiletpapier gebruiken.

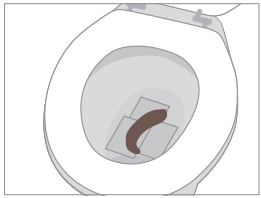

3 Ga naar het toilet.

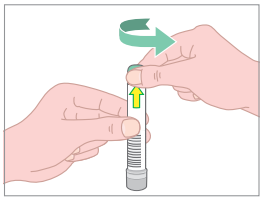


4 Draai het **groene dopje** los. Aan het dopje zit een staafje vast met aan het uiteinde een geribbeld gedeelte.

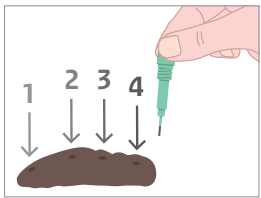


5 Prik met het geribbelde gedeelte op vier verschillende plaatsen in uw ontlasting voor het onderzoek. Het is voldoende als er een klein beetje ontlasting aan het geribbelde gedeelte blijft zitten.




6 Een **heel klein beetje** ontlasting aan het staafje is voldoende om het onderzoek goed uit te voeren. Als er te veel ontlasting in het buisje wordt gedaan, is deze niet meer bruikbaar.

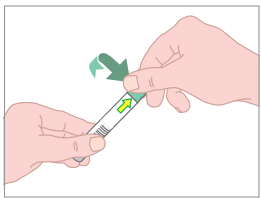


7 Stop het staafje terug in het buisje. Draai het groene dopje weer goed op het buisje vast. Het staafje komt in het gedeelte van het buisje waar vloeistof in zit. De vloeistof kan een beetje troebel worden. Dit is normaal.

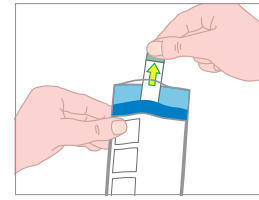

8 Stop het buisje in het bijgeleverde zakje. Dit is het witte zakje met blauwe rand.

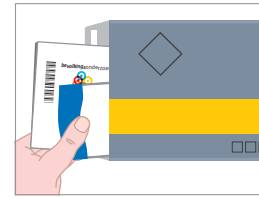

9 Vul het antwoordformulier in. Vergeet niet te vermelden op welke datum u de ontlasting in het buisje heeft gedaan. Doe het zakje en het antwoordformulier in de zilverkleurige retourenvelop.

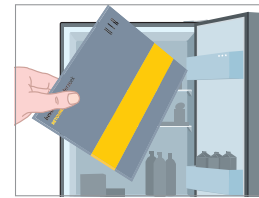

10 Totdat u de retourenvelop in de brievenbus doet, bewaart u deze in de koelkast.



11 Stuur het buisje en het antwoordformulier **binnen 24 uur** op in de retourenvelop. U hoeft geen postzegel te plakken.

Belangrijk

- U kunt het buisje één keer gebruiken.
- Stuur het buisje en het antwoordformulier op in de retourenvelop.
- Het buisje is alleen bedoeld voor de persoon die een uitnodiging voor dit onderzoek heeft ontvangen.
- Totdat u het buisje gebruikt, mag het buisje niet kouder dan 2 graden worden en niet warmer dan 30 graden.
- U kunt de envelop op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vóór 17.00 uur versturen. Van vrijdagavond tot en met zondagavond worden de brievenbussen niet gelegegd. Verstuur de envelop ook niet vlak voor een feestdag.